




Нярайгаас эхлэн
бүх насныханд



CRRT

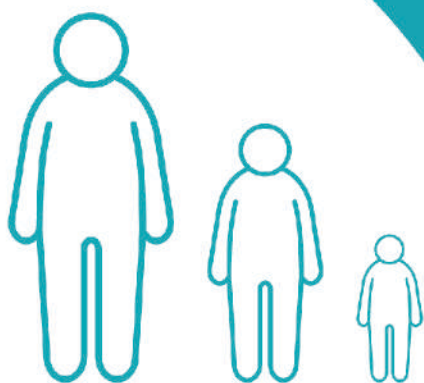

Плазмын эмчилгээ



CRRT

Бөөр тасралтгүй орлуулах CRRT төхөөрөмжийг бөөрний цочмог өвчтэй хүнд хэрэглэнэ. Төхөөрөмж нь 24/24 цагаар 2-3 өдрөөс 2-3 долоо хоногийн турш тасралтгүй ажиллах боломжтой бөгөөд өвчтөний бөөрийг орлож шээс, ус ба шингэнийг гадагшлуулна.



HF-440 нь нярай, бага насны хүүхдээс эхлээд насанд хүрэгсэд хүртэл бүх төрлийн өвчтөнд эмчилгээний өргөн цар хүрээг санал болгодог. Нэг зүүний диализ, бүх төрлийн антикоагулянт аргуудыг ашиглах боломжтой тул **HF-440** нь ямар ч эмнэлгийн хэрэгцээг төгс хангана. Цэвэрхэн дизайн бүхий мэдрэгчтэй дэлгэцийн интерфэйсээр дамжуулан өгөгдлийн бүртгэл, даралт болон урсгалын хяналтын графикуудыг хялбархан гаргана. Дугуйтай, 40 литр хүртэл шингэн зөөвөрлөх боломжтой нь операторын ажлын ачааллыг бууруулна. Бага жинтэй, хэмжээ жижиг тул хялбархан зөөвөрлөх боломжтой.

CVVH

Continuous Veno-Venous
HemoFiltration

CVVHD

Continuous Veno-Venous
HemoDialysis

CVVHDF

Continuous Veno-Venous
HemoDiaFiltration

SCUF


Slow Continuous
UltraFiltration

HVHF

Hight Volume
HemoFiltration

4 тариурын шахуургын горим

- Болус
- Цэвэрлэх
- Тасралтгүй
- In ratio to pre-blood шахуурга

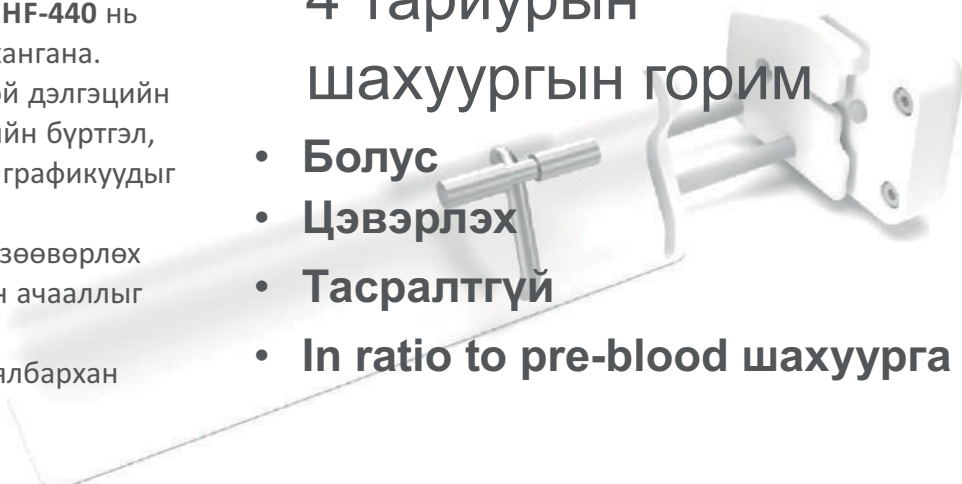



Плазмын эмчилгээ

"Плазмын эмчилгээ" гэх нэр томъёо нь плазм эсвэл бүхэл цусыг бүх элемент эсвэл тодорхой элементүүдээс цэвэрлэх төрөл бүрийн шүүлтүүрийн болон адсорбцийн аргуудыг багтаадаг бөгөөд энэ нь олон төрлийн өвчнийг эмчлэх боломжийг олгоно.

HF440 нь дээрх эмчилгээнүүдийг өвчтөний хэрэгцээнд тохируулан хэрэглэх боломжийг олгох бөгөөд плазмафрактоныг зайлуулах болон нэг зүүний гемодиализ гэх мэт онцгой шинж чанаруудыг санал болгодог.



ЦЭВЭРЛЭХ, УГААХ

- Угаахын өмнө плазмыг буцаах
- Шинжилгээнд дээж авах порт

TPE

Therapeutic Plasma Exchange

DFPP


Double Filtration PlasmaPheresis

HP

HemoPerfusion

PP

PlasmaPerfusion

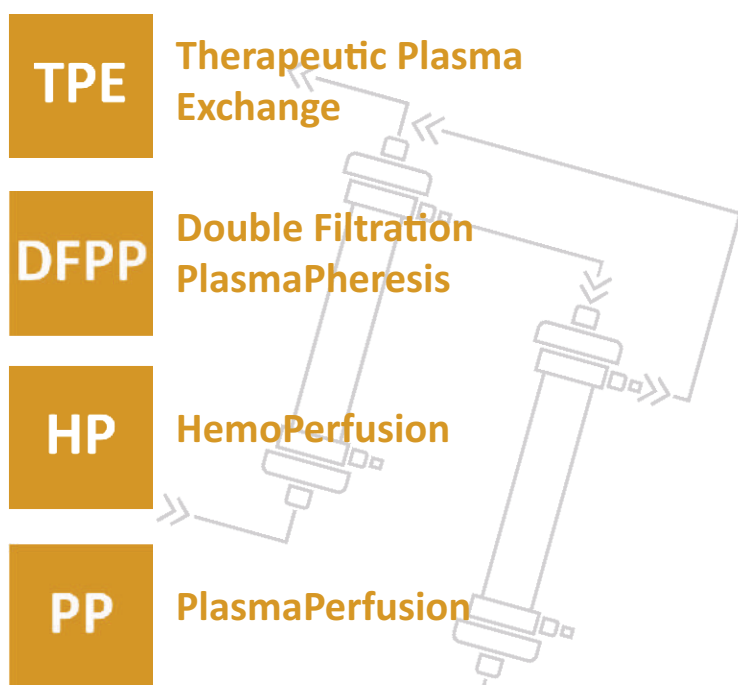

IdemBox



IDEMBOX, INFOMED -ийн үүлэн технологи танд эмчилгээ, төхөөрөмжийн талаар болон бусад шаардлагатай үзүүлэлтийн мэдээллийг бодит цаг хугацаанд хүргэнэ.

Өөрийн ажилд зориулан цаг хугацааг хэмнээрэй.

ТЕХНИК ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

ХЭМЖЭЭ БА ЖИН

Өндөр	160 см
Өргөн	72 см
Гүн	66 см
Жин	58 кг

ТЕХНИК ДАТА

Цусны урсгал	0 to 450 ml/min
Орлуулах шингэн	0 to 12000 ml/h
	0 to 12000 ml/h
Ultrafiltration flow	0 to 12000 ml/h
Pre-blood pump	0 to 4000
Нийт жингийн алдагдал	0 to 13 мл/кг/ц

ДАРЛТЫН ХЯНАЛТ

Артерийн (РА)	+10 to -400 mmHg
Венийн (PV)	-10 to +300 mmHg
Даралтын уналт	0 to 600 mmHg
Transfilter	0 to 600 mmHg
ТМР	0 to 400 mmHg
Нэмэгдүүлсэн даралт	-500 to +500 mmHg

ШИНГЭНИЙ ХЯНАЛТ

Жингийн тоо	3
Жингийн хязгаар	2 x 40 Kg + 1 x 10 Kg

ШАХУУРГУУД

Төрөл	Peristaltic
Тоо	5

ТАРИУРЫН ШАХУУРГА

Тариурын хэмжээ	0 - 60 мл
Болус	0 - 15 мл
Тасралтгүй	0 - 15 мл/ц

Цэвэрлэгээний явцад тариурын шахуургыг мөн ашиглах боломжтой.

ДОХИОЛОЛ

Дуут ба гэрлийн дохиолол

Дэлгэц дээрх дохиоллын заавар

ИЛРҮҮЛЭГЧ

Бөмбөлөг ба хөөс	20 µl -ээс дээш
Цусны битүүмжлэл алдагдах	Литр цусанд 1.75 мл

ХАЛААГЧ

Нэг удаагийн уут бүхий хавтан

Тохиргоо 35 - 38°C

БУСАД

Эмчилгээнд нэг зүүний гемодиализ ашиглана

Автомат шингэний нэмэлт

Батарейн ажиллах хугацаа 20 мин

Завсарлага авах товчлуур

Мэдрэгчтэй дэлгэц 10"

График туслах хяналт

Профайл хадгалах

Туслах хяналтын дүүргэх тохиргоо

Мэдээллийн шинжилгээний үүлэн систем

WiFi ашиглан мэдээлэл дамжуулах



Route de Compois, 11
1252 Meinier - Switzerland
Phone: +41 22 827 62 20
www.infomed.swiss

Албан ёсны дистрибьютор **НУГАН ХХК**
Утас: **976 70131248**

